


CHORDS

Fibre dentaire photo-polymérisable à usages multiples.
Modelage aisé grâce à la grande flexibilité des fibres polymères en polyamide.

Résistance mécanique assurant des reconstructions durables pendant de nombreuses années.

Usages multiples dans tous les domaines de la dentisterie.
(Longueur de 10 cm. Largeurs disponibles : 2, 3 ou 4 mm.
Épaisseur environ 0,3 mm)

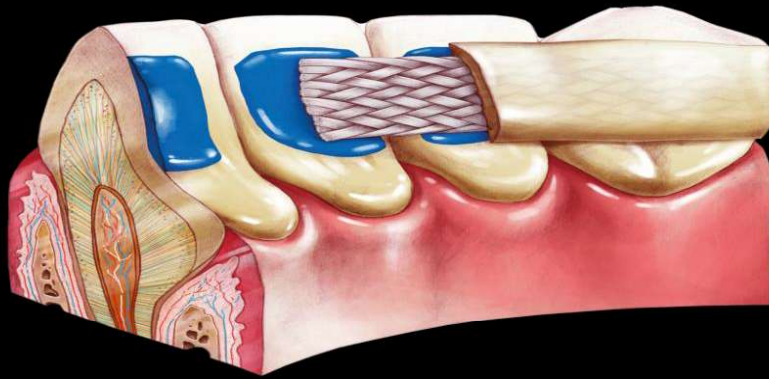

Indication

Support pour les restaurations prothétiques fixes en composite :

(Couronnes, endocouronnes, bridges, inlays, onlays).

Atelles de stabilisation dentaire (temporaires et permanentes).

Contention orthodontique.

courono-radiculaires individualisés

Mode emploi

Préparer les dents conformément a la pratique standard.
Mordancer les dents et appliquer la restauration du pont.
Laisser au moins 1,5mm au dessus pour une couche externe de composite. Retirer le revêtement résistant a la lumière. Polymériser en section ne dépassant 5mm de manière séquentielle sur toute la longueur.

Jamais les fibres sur la composite déjà polymérisée.
(Toujours polymériser la fibre avec le composite).

Durée de validité (36 mois).

Conserver a une t° inférieur a 25°.Après ouverture les fibres chords peuvent être conservées a basse t° mais pas inférieurs a 3° et pas plus de 6 mois



CHORDS: Modelage pratique

Ne pas couper : Il convient de choisir la largeur appropriée
Trois largeurs standard : 2 mm, 3 mm et 4 mm.

- Une méthode indirecte externe.
(Isoler les dents avec de la vaseline ou silicone).
- Une méthode indirecte interne.
- (isoler avec de la vaseline ou silicone et protéger la gencive avec du caoutchouc).
- Une méthode directe (éviter la contamination par le sang et la salive a l'aide d'une digue en caoutchouc).